




Q-MED
Ratownictwo Medyczne Łódź

Badanie laboratoryjne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2

Metoda badania techniką RT-PCR to obecnie najbardziej czuła oraz swoista metoda diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Metodę rekomenduje WHO oraz WSSE, jest również uznana przez władze państw członkowskich UE. Badanie oparte na pobraniu próbki od pacjenta przy użyciu wymazu. Czas realizacji badania od pobrania próbki do wystania klientowi to 24h.

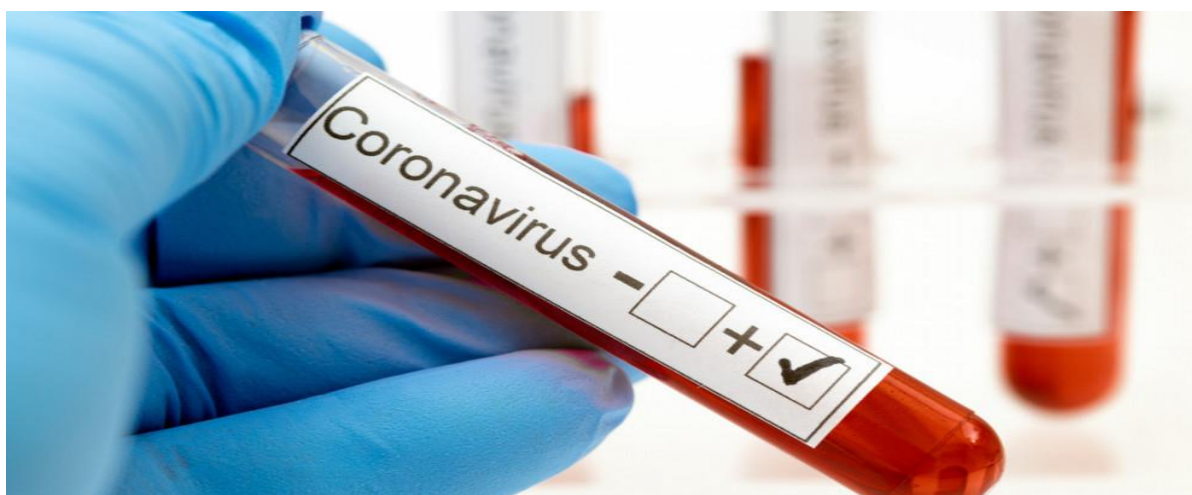

WYNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM PO WCZEŚNIEJSZYM POINFORMOWANIU PRACOWNIKA

CENA 420 zł

* BADANIE WYKONUJEMY W MIEJSCU DOGODNYM DLA KLIENTA, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z PRACOWNIKIEM Q-MED




Q-MED
Ratownictwo Medyczne Łódź

Badanie w kierunku obecności antygenu SARS-CoV-2

Test ilościowy

W porównaniu do testu antygenowego jakościowego (manualnego, kasetkowego), **badanie ilościowe** przeprowadzany jest na zautomatyzowanych platformach immunochemicznych. Zapewnia to lepszą kontrolę procesu laboratoryjnego i uniezależnienie wyniku od subiektywizmu operatora.

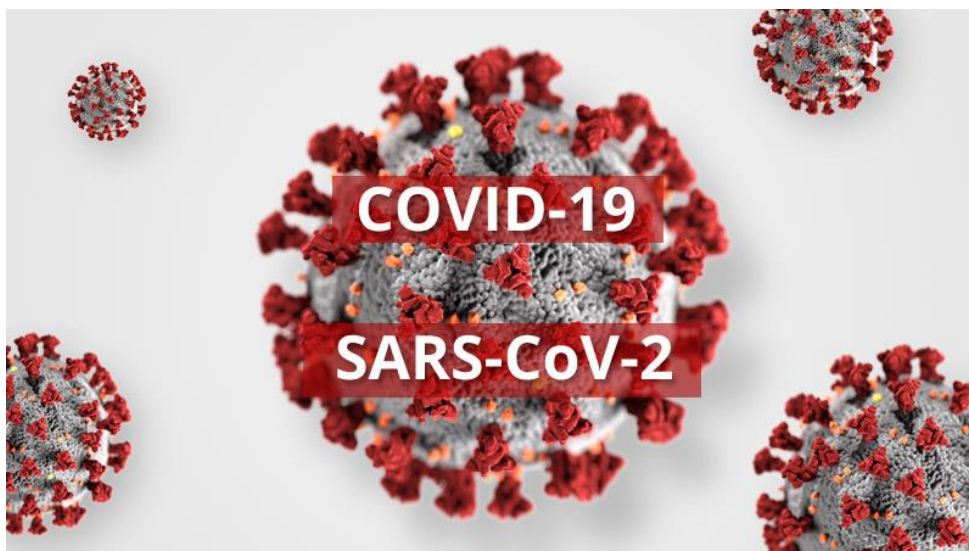

WYNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM PO WCZEŚNIEJSZYM POINFORMOWANIU PRACOWNIKA

CENA 150 zł


* BADANIE WYKONUJEMY W MIEJSCU DOGODNYM DLA KLIENTA, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z PRACOWNIKIEM Q-MED

Oferta szybkich testów w kierunku SARS-CoV-2


Wyniku z zaświadczeniem w ciągu 20 minut

Test na obecność antygeny SARS-CoV-2 (metodą wymazu)


Test do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w wymazach z jamy nosowo-gardłowej oraz w wymazach z jamy ustnej i gardła przy użyciu szybkiej metody immunochromatograficznej. Test daje możliwość wykrywania aktywnego stadium choroby w ciągu 15-20 minut.

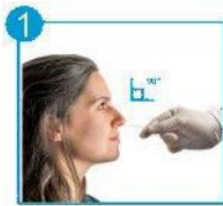

1 Włożyć wymazówkę **poziomo** do jamy nosowej na **głębokość ok. 3 cm**

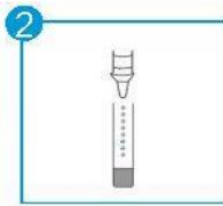


2 Do probówki do ekstrakcji próbki wlać **10 kropli (0,3 ml)** buforu ekstrakcyjnego.

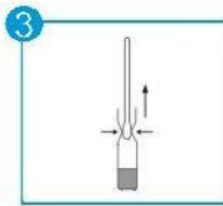

3 Włożyć wymazówkę do probówki ekstrakcyjnej, **obracać ją** w probówce przez **około 1 min.**



4 Zakręcić korek probówki ekstrakcyjnej i nanieść **4 krople** roztworu z tej probówki w zagłębienie S płytki testowej.

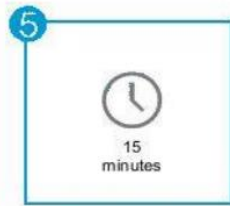

5 Po **15 minutach** od naniesienia odczytać wynik. Nie odczytywać wyniku po 20 minutach lub dłużej.

Zapewniamy również niezbędne wsparcie merytoryczne jak i logistyczne dla naszych Klientów.

ZAŚWIADCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM PO WCZEŚNIEJSZYM POINFORMOWANIU PRACOWNIKA

CENA 75 ZŁOTYCH